

Sonický kartáček Philips Sonicare DiamondClean: Pojďme si čistit zuby v naprosto novém rozměru!



**trnd
Projekt**

Pojďme seznámit veřejnost se zubními kartáčky Philips Sonicare.

Vítej ve vybrané skupině účastníků našeho nového projektu! Je skvělé, že společně s komunitou trnd můžeme vyzkoušet sonický zubní kartáček Philips Sonicare DiamondClean, díky kterému je čištění zubů účinnější.

Díky technologii Philips Sonicare DiamondClean budou naše dásně a zuby zdravější.

Nejlepší představení značky Sonicare v elegantním kartáčku.



Ve spolupráci s našimi 200 trnd-partnery z České republiky se staneme online-reportéry. Rádi bychom vyzkoušeli nejnovější výrobek z řady sonických zubních kartáčků Philips Sonicare: Philips Sonicare DiamondClean a podělili se o své zkušenosti na online platformách (na stránkách hodnocení produktu, na blogu projektu Philips Sonicare a našem soukromém blogu).

Vkročíme tedy společně do nového rozměru čištění zubů a pojďme seznámit naše přátele a známé s tímto produktem.

Pojďme začít společně!

V tomto projektu trnd se snažíme:

1

... vyzkoušet sonický zubní kartáček Philips Sonicare DiamondClean společně s 200 trnd-partnery z České republiky.



Vyzkoušet.

2

... podělit se o svou zkušenost s ostatními prostřednictvím Internetu. Jako online-reportéři pro Philips Sonicare DiamondClean budeme hodnotit produkt na našem vlastním blogu a na platformách, jako je například: heureka.cz, nebo natočíme video pro YouTube. Posílíme spoustu obrázků do našeho Fotoalba a píšme komentáře na náš projektový blog Philips Sonicare.



Podělit se o svou zkušenost.

3


... vyjádřit svůj názor na sonický kartáček Philips Sonicare DiamondClean prostřednictvím tří online dotazníků.



Vyjádřit svůj názor.

4

... shromažďovat zprávy o konverzacích o produktu, včetně dotazníků, abychom se tak podělili o názory našich přátel na sonický zubní kartáček Philips Sonicare DiamondClean.

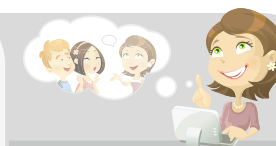

Podávat zprávy.

Inovace ve světě čištění zubů.

PHILIPS
sonicare

Přestože v České republice není čištění zubů elektrickým kartáčkem tolik populární, stále více lidí si začíná pokládat otázky: Měl/a bych používat ruční anebo elektrický kartáček? Který z nich je účinnější?

Otázka ústní hygieny se stále více dostává do středu pozornosti a lidé stále více dbají o ústní hygienu a zdraví svých zubů.

Philips Sonicare představil svůj první sonický kartáček koncem 80.let. A od té doby se neustále vyvíjí podle toho, jak si lidé po celém světě čistí zuby.

Patentovaná sonická technologie znamená, že kombinací vysoké frekvence a vysokého kmitočtu štětín v hlavici kartáčku se v ústech vytváří aktivní tekutina. Tato dynamická čistící akce čistí zuby a linii dásní šetrně a efektivně.

Každodenní používání zubního kartáčku Philips Sonicare pomáhá zabránit zánětu dásní. Dáseň se tak do dvou týdnů stává zdravější a silnější.

Philips Sonicare DiamondClean.

Zubní kartáčky dnes musí splnit mnoho spotřebitelských požadavků: udržet přirozenou bělost zubů, být šetrný k dásním, mít pohodlné a snadné používání a k tomu odstranit plak i z těžko dostupných míst.

Je možné zajistit všechny tyto požadavky v jednom zubním kartáčku? ANO!



*Dokonalé čištění.
Zářivé výsledky.*



Sonické zubní kartáčky Philips Sonicare DiamondClean byly vyvinuty tak, aby splnily každé přání. Čistí se čtyřnásobnou efektivitou a bělí dvakrát lépe, než ruční zubní kartáčky, čímž zajišťují zlepšení ústní hygieny. Pomáhají dodržovat správný čas na čištění zubů, mají moderní, stylový tvar a díky USB nabíjení jsou vhodné také na cesty.

Dokonalé čištění a zářivé výsledky v jediném zubním kartáčku.

Používáním zubního kartáčku Philips Sonicare DiamondClean dbáte o zdraví vašich zubů, ale také celé ústní dutiny.



Optimální čištění mezizubních prostor a linie dásní umožňuje zlepšit zdravotní stav dásní už za dva týdny. Kartáček umožňuje mnohem lepší vyčištění mezizubních prostor a odstraní mnohem více plaku v porovnání s ručním kartáčkem.



Díky technologii Sonicare odstraňuje až pětikrát více plaku než ruční zubní kartáček.



Dvakrát lepší bělení zubů, než ručním kartáčkem.

Účelem zubního kartáčku Philips Sonicare DiamondClean je dokonalé čištění.

Jedinečné tvarování hlavic dovolí odstranit zubní plak i z těžce dostupných míst na zadních zubech.



Hlavičky DiamondClean, nejlepší hlavičky Sonicare, mají středně tvrdé štětinky ve tvaru diamantu, které efektivně a zároveň šetrně odstraňují plak. Výjimečně kvalitní čištění a bělejší zuby ve srovnání s ručním kartáčkem.



Jedinečný dynamický účinek kartáčku Sonicare šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní.




5 režimů čištění zajistí efektivnější vyčištění zubů: Clean, White, Polish, Gum Care a Sensitive: extra jemný režim pro citlivé zuby a dásně.



Philips Sonicare DiamondClean šetří váš čas.



Časovač Quadpacer vám pomáhá dodržovat doporučenou dobu čištění.

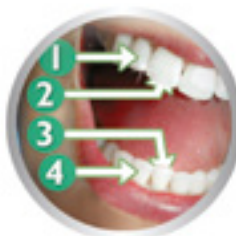

Časovač s 30-ti vteřinovým intervalem Quadpacer umožňuje rovnoměrné a důkladné čištění vašich úst. Máte tak vždy půl minuty na čištění horních a dolních zubů, zvenčí i zevnitř.



Baterie vydrží až 3 týdny čištění.

Philips Sonicare DiamondClean: praktický a elegantní.

Philips Sonicare DiamondClean nabízí jako formu nabíjení klasickou nabíječku, nabíjecí sklenici a nabíječku USB s cestovním pouzdrem.

Nabíječka Philips Sonicare DiamondClean se stane elegantním doplňkem vaší koupelny. Jednoduše položte kartáček do nabíječky a kartáček se bude nabíjet.



Nabíjecí sklenice Philips Sonicare DiamondClean se stane elegantním doplňkem vaší koupelny. Jednoduše položte kartáček do sklenice a kartáček se bude nabíjet. Můžete ji také použít na vypláchnutí úst po čištění zubů.

Díky nabíjecímu cestovnímu pouzdru si můžete vzít kartáček DiamondClean všude s sebou, aniž byste se museli bát vybití baterie. Můžete jej nabíjet připojením k notebooku přes USB kabel, nebo ze zásuvky.



Tvůj balíček.

Na začátku projektu dostane každý účastník počáteční výbavu, obsahující následující:

Pro Tebe:

- 1x Sonický zubní kartáček Philips Sonicare DiamondClean
- 1x Tričko pro "online reportéra" Philips Sonicare DiamondClean
- Průvodce harmonogramem projektu — souhrnný trnd spouštěcí WOM dokument — který obsahuje informace o produktech Philips Sonicare DiamondClean a mnoho inspirujících nápadů, které podnítí navázání komunikace.
- Marketingové dotazníky (brožura o 40 stránkách) určené ke konverzacím s přáteli a rodinou.

K vyzkoušení pro Tebe a Tvé přátele

- 10x Hlavice Philips Sonicare DiamondClean

Pro Tvé přátele:

- 10x Letáček o kartáčkách Philips Sonicare.
- 20x Kupón se slevou 20% na nákup kartáčků Philips Sonicare



Tvé úkoly v projektu trnd.

1

Otevři balíček a začni fotit.

Vyzkoušej:

Nejprve rozbál balíček s Tvojí výbavou – otevři ho například s ostatními členy rodiny, s přáteli, nebo kolegy – a seznam se s jeho obsahem, se sonickým zubním kartáčkem Philips Sonicare DiamondClean a dalšími informacemi, které nalezneš uvnitř. Potom DiamondClean začni zkoušet. Hurá na to!

Hodně foť:

Pojďme se podělit o momenty rozbalování a prvního zkoušení produktu s přáteli a rodinou prostřednictvím fotografií. Můžeš nám poslat své fotografie společně s hlášeními o rozhovorech o produktu. Je to snadné:

Navštiv www.trnd.cz/philips-sonicare a klikni na tlačítko „Napiš hlášení“.

2

Vyjádři svůj názor.

Můžeš nám napsat svůj názor na sonický zubní kartáček Philips Sonicare DiamondClean v průběhu osmi týdnů trvání projektu tím, že vyplníš tři online dotazníky:

- na začátku: počáteční dotazník
- uprostřed: průběžný dotazník
- na konci: závěrečný dotazník

Tyto dotazníky nalezneš na stránkách trnd, v části určené pro členy. Jakmile bude online anketa připravena, obdržíš od nás informace e-mailem.

3

Zdokumentuj svou zkušenost.

Jako trnd–partner obdržíš sonický zubní kartáček Philips Sonicare DiamondClean, abys vyjádřil/a svůj názor o jeho vzhledu, funkcích, používání, účinnosti a zdokumentoval/a jej na Internetu. Napiš 5–10 zpráv mimo stránky trnd (na Tvém blogu, video portálech, fórech, Twitteru, Facebooku, atd.)

Budeme rádi, když se s námi podělíš o odkazy na tyto stránky, videa, poznámky prostřednictvím plochy můjtrnd.

Splněné úkoly:

Napsal/a jsem , publikoval/a a odeslal/a odkaz o tomto počtu hlášení:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

4

Piš hodnocení online.

Po skončení projektu napiš a publikuj své konečné hodnocení, které shrnuje Tvůj celkový dojem z produktů Philips Sonicare DiamondClean na stránkách, jako je například heureka.cz. Zde můžeš produkt také ohodnotit.

Sepiš všechna kritéria, výhody a nevýhody, se kterými ses setkal/a, a Tvé připomínky. Protože se jedná o kvalitativní hodnocení, může být cenné těm, kteří uvažují o koupi zubního kartáčku Philips Sonicare DiamondClean .

Abychom mohli Tvé hodnocení na heureka.cz (a jiných portálech) vidět, pošli nám prosím odkaz v hlášení na ploše "můjtrnd".

Splněné úkoly:

☐ Závěrečné hodnocení publikováno, odkaz poslán na trnd.

5

Abys pomohl produktu DiamondClean stát se populárním mezi Tvými přáteli.

Mluv se svými přáteli:

Poté, co ses přesvědčil/a o tom, že Philips Sonicare DiamondClean je účinný, pomoz nám společně s ostatními účastníky seznámit s tímto produktem veřejnost. Například můžeš svým přátelům a kolegům...

- ... vyprávět o tom, jak snadné a účinné je čištění zubů a že i oni se mohou dozvědět o unikátních výrobcích Sonicare.
- ... dát jednu z přibalených čistících hlav Philips Sonicare DiamondClean, aby si kartáček sami vyzkoušeli.

Sbírej jejich názory a hodnocení:

Staň se průzkumníkem trhu pro značku Philips Sonicare DiamondClean! S dokumenty určenými k průzkumu trhu, které najdeš v balíčku, se můžeš dotázat 20 přátel, známých, nebo kolegů na téma čištění zubů a značky Philips Sonicare. Toto je také příležitost říci jim dodatečné informace, které jinde nenajdou. Více informací najdeš v brožurce, určené na průzkum trhu.

Napiš hlášení o Tvých rozhovorech.

Poté, co jsi dal ostatním možnost seznámit se s produkty Philips Sonicare DiamondClean, je důležité, abys nás o tom informoval/a. O tom, jak jsi hovořil/a s přáteli, známými, nebo kolegy, můžeš napsat hlášení.

V těchto hlášeních bychom se rádi dozvěděli s kolika přáteli a známými jsi hovořil/a, jaká byla jejich reakce a co je zajímalo dozvědět se o produktech Philips Sonicare DiamondClean.

Napsat taková hlášení je snadné. Najdi si odkaz: www.trnd.cz/philips-sonicare. Klikni na tlačítko "Napiš hlášení" a můžeš začít psát svou zprávu.

Po celou dobu trvání projektu sdílíme své názory v tématech týkajících se sonického zubního kartáčku Philips Sonicare DiamondClean a čištění zubů na:

www.trnd.cz/philips-sonicare

Své dotazy a návrhy, týkající se projektu, můžeš poslat na e-mailovou adresu lila@trnd.cz.

Zásady trnd.

Abychom docílili upřímné, otevřené a úspěšné verbální propagace – šeptandy, vytvořili jsme několik základních pravidel. Jako člen projektového týmu budeš povinen řídit se podle následujících zásad.

Bud' otevřený.

Na trnd projektu není absolutně nic tajného. Nevytváříme žádné prodejní místo, ani se nesnažíme o skrytou reklamu. Všichni členové by měli v době trvání kampaně – až budou hovořit se svými přáteli a známými – dát všem na vědomí, že jsou účastníky trnd a že se podílí na jednom z projektů. Neměl/a by ses snažit někoho klamat. V žádném případě nejsi prodejcem, který putuje od dveří ke dveřím ve snaze prodat produkt, anebo myšlenku! Jednoduše bud' otevřený/á a řekni ostatním svůj vlastní názor.

Bud' upřímný.

Zdá se to být samozřejmé, ale bohužel ne vždy tomu tak je. Jedině upřímná „šeptanda“ funguje. To znamená neovlivňovat lidi a nesnažit se vylíčit věci v lepších barvách, než jaké ve skutečnosti jsou. Jednoduše řekni svůj upřímný názor a rovněž názor Tvých přátel a známých.

Měj uši nastražené.

„Šeptanda“ se nesnaží ovlivnit Tvé přátele, nebo Tvé známé. Není třeba cokoli přeceňovat – jednoduše jim řekni o novém produktu z projektu trnd a nechej je vyjádřit jejich názor – i když nesouhlasí s tím Tvým. Byli bychom rádi kdybys nashromáždil/a co nejvíce názorů a podělil/a ses s námi o ně!



Věta, kterou můžeš říci ostatním: ...

Sonický zubní kartáček Philips
Sonicare DiamondClean:
Díky vysoké účinnosti zajistí
čisté, přirozeně bílé zuby a
zdravé dásně.



Tipy na informace, o které se můžeš podělit.

Jestliže tě Philips Sonicare DiamondClean přesvědčil o svém snadném používání, můžeš jej doporučit svým přátelům a známým.



Existuje spousta příležitostí, při kterých můžeš předat informace o sonickém zubním kartáčku Philips Sonicare DiamondClean. Zde je pár nápadů, jakým způsobem se můžeš podělit o své zkušenosti a další informace se svými přáteli a známými:

Osvěž se před důležitou schůzkou.

V dnešní době už není překvapující mít zubní kartáček v kanceláři, neboť na důležitou schůzku chceme být perfektně připraveni. Vezmi si tedy sonický zubní kartáček Philips Sonicare DiamondClean s sebou do práce a doporuč jej svým kolegům. Pokud si budou čistit zuby kartáčkem DiamondClean, nebudou se muset alespoň obávat o čistotu a zdraví zubů.

Na kávě s přáteli.

Často se sejdeme s přáteli u kávy na kus řeči. Můžeš jim říci o skvrnách, které může pití kávy zapříčinit a o tom, že znáš na tento problém řešení. Pokud budou používat kartáček DiamondClean, jejich zuby zůstanou bílé.



V dnešní době je zvykem, že když si něco chceme koupit, často si o tom nejprve přečteme na Internetu. Vyhledáme si porovnání různých produktů a jejich hodnocení, abychom se o produktu dozvěděli více informací. Podělme se o náš názor a ohodnoťme produkt Philips Sonicare DiamondClean na stránkách jako je heureka.cz, svém blogu, stránkách sociálních sítí, atd. Poděl se o svůj názor, čímž usnadníš rozhodování druhým.

Poděl se o svůj názor na Internetu.

Během rodinných večeří rádi pijeme víno. Říká se, že sklenička vína denně je zdravá. Nicméně může zapříčinit skvrny na zubech. Při té příležitosti můžeme ukázat našim známým kartáček Philips Sonicare DiamondClean a povědět jim, jakou s ním máme zkušenost. Když ho pak budou chtít vyzkoušet, můžeme jim dát možnost s jednou z dalších vyměnitelných čistících hlavíc.

Rodinné večeře a společné pití vína.

Jistě máš spoustu dalších zajímavých nápadů, jak navázat konverzace o produktu. Poděl se o ně s námi ve svých hlášeních, a také o to, jak pomáháš zvyšovat povědomí o Philips Sonicare mezi svými přáteli, rodinnými příslušníky, kolegy a známými. Těšíme se na Tvé zajímavé nápady a fotografie!

Technologie Sonicare.

Patentovaná sonická technologie zaručuje dynamické a hloubkové čištění, a to i v místech těžko dostupných.

Jak tento výkonný zubní kartáček funguje?

Frekvence: počet kmitů kartáčku za časovou jednotku

Amplituda: pohyb štětín k zubům, nebo od nich

Rychlost hrotu štětín = Frekvence * Amplituda

Co je to technologie Sonicare?



Jedinečná rychlost hrotu štětín: 31 000 kmitů za minutu



Dynamická čistící akce

Patentovaná sonická technologie napomáhá jedinečnému dynamickému proudění tekutiny. Díky obzvláště vysoké frekvenci a vysoké amplitudě, kartáček vykoná 31 000 kmitů za minutu. Vytvoří dynamický proud tekutiny, která efektivně odstraní zubní plak a skvrny.


Dynamické proudění jemně našlehá zubní pastu a sliny do tekuté pěny bohaté na kyslík. Rychle se pohybující hlavice kartáčku snadno směřuje tuto tekutou pěnu kamkoliv v ústech: do zadního úseku chrupu, do mezizubních prostor, pod okraj dásní, kde se daří bakteriím vytvářejícím zubní plak. Takto odstraňuje plak z těžko dostupných míst. A masírováním dásní stimuluje krevní oběh.

Rozdíl mezi pohyby elektrických kartáčků


Kartáček s klasickou oscilo-rotací silou

Vibrující kartáček 'Buzzer'

Kartáček Sonicare

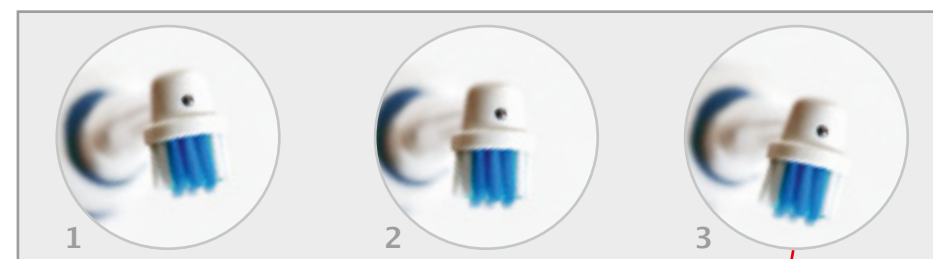

- 1: vysoká amplituda, nízká frekvence
- 2: nízká amplituda, vysoká frekvence
- 3: vysoká amplituda a vysoká frekvence

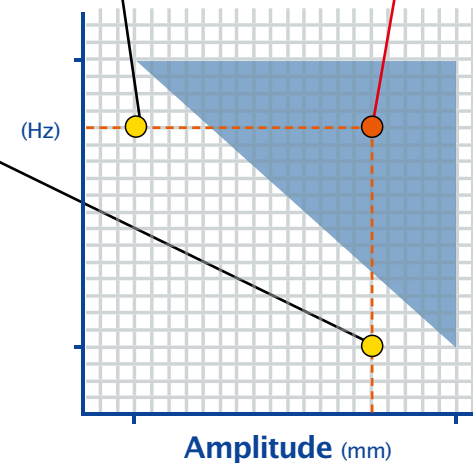

Jak čistit se sonickým kartáčkem Philips Sonicare DiamondClean.

Pokyny pro správné používání zubního kartáčku Philips Sonicare DiamondClean shrnuté do následujících 7 kroků:

- 1 Naneste na vlhká vlákna malé množství zubní pasty.
- 2 Přiložte kartáček k zubům pod mírným úhlem ve směru k dásni dle obrázku.
- 3 Poté zmáčkněte vypínač.
- 4 Kartáček ved'te po zubech jemným tlakem a nechte jej pracovat. Tak docílíte maximálního efektu. Netlačte, nepoužívejte klasickou stírací techniku.
- 5 Pomalu a jemně pohybuje kartáčkem na každém zubu směrem dopředu a dozadu, aby delší vlákna pronikla do mezizubního prostoru. Pokračujte tak po celou dobu čištění.
- 6 Začněte čistit v sekci 1 (vnější strana zubů v horní čelisti), čistěte ji po dobu 30 sekund a poté přejděte k sekci 2 (vnitřní strana zubů v horní čelisti). Dále pokračujte v sekci 3 (vnější strana zubů ve spodní čelisti) a po 30 sekundách v sekci 4 (vnitřní strana zubů ve spodní čelisti). Čištění si můžete rozdělit na 4 části podle časovače Quadpaceru.
- 7 Po základním vyčištění zubů můžete věnovat trochu více času i obtížněji čistitelným plochám, kde se často objevují pigmentace. Můžete i též čistit jazyk jak vypnutým, tak zapnutým kartáčkem.



Historie zubního kartáčku.

3500 př. n. l.

První záznam o tom, že člověk cíleně pečoval o své zuby, je starý 3500 let a zanechali nám jej Babylóňané, kteří prý k očištění svého chrupu používali cosi jako „žvýkací klacíky“.

Nejproslulejším a po mnoha tisíciletích používaným „zubním klacíkem“ je Meswak – kořen z rostliny, kterou staří Egyptané nazývali „strom – zubní kartáček“, Peršané „Peelu“ a Arabové ji zvou „Arak“.

1600 př. n. l.

Záznamy, pocházející z roku 1600 př.n.l., vypovídají, že žvýkací klacíky se používaly také v Číně.

1500 n. l.

První štětinový zubní kartáček podobný tomu našemu umělohmotnému začali Číňané používat v 15. století n. l. Oholili šiji divokého sibiřského kance a získané štětiny vsadili do bambusové nebo kostěné rukojeti.

1780 n. l.

Přibližně v roce 1780 byl v Evropě vyroben první masově produkováný kartáček a to Williamem Addisem z Clerkenaldu v Anglii.

1850 n. l.

Prvním člověkem, který si nechal patentovat kartáček, byl Američan H.N. Wadsworth v r.1850.

1937–8 n. l.

Vynález nylonu panem Wallaceem H. Carothersem přispěl i k vylepšení zubních kartáčků nylonovými štětinami a stal se tehdy jedním ze symbolů moderní doby.

1939 n. l.

První elektrický kartáček, tedy kartáček na elektrický pohon, vymysleli v roce 1939 Švýcaři, ale prodávat ho začali Američané pod názvem Braxodent.

1987 n. l.

V roce 1987 přišel na trh rotační elektrokartáček.



Historie Sonicare.

Příběh Sonicare začal v druhé polovině 80.let společně s příběhem prvních elektrických zubních kartáčků, které byly vynalezeny v garáži. Dnes už se jich vyrábějí nejmodernějšími technologiemi miliardy v továrnách Philips Oral Healthcare v americkém městě Snoqualmie.



Úspěch Sonicare je založený na skvělé týmové práci – parodontologů a biotechnologů, kteří spolu pracovali na Washingtonské univerzitě v Seattlu. Vyvinuli Sonicare podle klíčových faktorů, založených na zkušenostech uživatelů a tím prokázali, že technologie Sonicare funguje.

S rozsáhlým klinickým výzkumem, vedeným na 50 univerzitách po celém světě a publikovaným ve 175 studiích, je technologie Sonicare prokázána jako vysoce efektivní na odstranění zubního plaku a skvrn a zdraví dásní.

Sonicare je globální.

V říjnu roku 2000, Royal Philips Electronics koupil společnost Optiva Corporation – která je dnes známá pod jménem Philips Oral Healthcare. Sonicare skvěle zapadá do celkového zaměření společnosti Philips na zdraví a životní styl a Optiva Corporation tak okamžitě dostala společnost Philips na vedoucí pozici v inovaci v oblasti péče o zdraví úst.

Přes 17 miliónů současných uživatelů po celém světě se těší z výhod zubních kartáčků Sonicare.



Technologie péče o ústní dutinu je podložena 175 klinickými a laboratorními studiemi na více než 50 univerzitách a výzkumných ústavech po celém světě a přesvědčila zubní lékaře. Nyní je technologie Sonicare nejvíce doporučovanou značkou dentálních profesionálů.

Produkty Philips Sonicare.

Všechny zubní kartáčky Sonicare čistí zuby se stejnou efektivitou díky sonické technologii, rozdíl spočívá ve funkcích a doplňcích.



Philips Sonicare EasyClean

Efektivnější odstranění plaku díky unikátní dynamické čistící akci Philips Sonicare. Má 1 režim.

Balení obsahuje: 1x sonický zubní kartáček s náhradní hlavici, nabíječku.

Cena: 1599 Kč

Philips Sonicare HealyWhite

Každému se líbí zářivě bílý úsměv! HealyWhite při pravidelném používání režimu Clean & White prokazatelně během dvou týdnů odstraní každodenní zabarvení.

3 režimy: Clean, Sensitive, Clean & White.

Balení obsahuje: 1x sonický zubní kartáček se dvěma hlavicemi ProResult, 1x dobíjecí stanice s držákem náhradní hlavice, 1x hygienický cestovní kryt, 1x cestovní pouzdro.

Cena: 2599 Kč



Philips Sonicare For Kids

Používáním zubního kartáčku Sonicare For Kids se čištění stává zábavou. 2 nastavitelné režimy vhodné pro děti docílí jemného a efektivního čištění. Ergonomický design rukojeti, 2 velikosti čistících hlav.

Balení obsahuje: 2x kartáčková hlavice, 3x vyměnitelný kryt, 1x dobíjecí sonický kartáček, 1x robustní dobíjecí stanice s držákem náhradní hlavice.

Cena: 1799 Kč



Philips Sonicare FlexCare

Technologie Philips Sonicare FlexCare se přizpůsobí potřebám vaší péče o ústa a zlepšuje zdraví dásní. 3 režimy čištění: Clean, Sensitive, Massage. 2 Programy: MaxCare a GoCare.

Balení obsahuje: 1x sonický kartáček se dvěma hlavicemi ProResults (Standardní a Mini), 1x Deluxe nabíječka s úložným prostorem na šňůru a krytem na hlavici, 2x hygienické cestovní kryty, 1x Deluxe Soft cestovní pouzdro.

Cena: 3499 Kč

Philips Sonicare FlexCare+

Kombinací patentované sonické technologie 5 režimů čištění (Clean, White, Polish, Gum care, Sensitive) je FlexCare+ vaším řešením pro kompletní péči o dásně.

Balení obsahuje: 1x sonický kartáček se dvěma hlavicemi (standardní a mini), 1x UV sanitizér, 1x cestovní nabíječka, 2x hygienický cestovní kryt, 1x cestovní pouzdro.

Cena: 4499 Kč



Philips Sonicare DiamondClean

Představení toho nejlepšího od Sonicare v jediném elegantním kartáčku. 5 režimů čištění (Clean, White, Polish, Gum care, Sensitive) a hlavice ve tvaru diamantu pro efektivní čištění.

Balení obsahuje: 1x sonický zubní kartáček, 2x kartáčková hlavice DiamondClean (standardní a mini), 1x dobíjecí stanice, 1x dobíjecí sklenička, 1x cestovní dobíjecí pouzdro, 1x USB kabel, 1x USB síťový adaptér, 2x hygienický cestovní kryt.

Cena: 4999 Kč

Philips AirFloss

Jestliže nepoužíváte denně zubní nit, bakterie mohou zůstat v mezizubních prostorech. Proud drobných kapek vody, urychlený vzduchovým tlakem, narušuje a odstraňuje zubní plak v mezizubních prostorech díky technologii microburst Sonicare AirFloss.

Balení obsahuje: 1x přístroj, 1x nástavec, 1x nabíjecí stojan.

Cena: 2599 Kč



Fakta a čísla.

Philips Sonicare DiamondClean.

Používáním sonického zubního kartáčku Philips Sonicare DiamondClean je čištění **pohodlnější a efektivnější.**

Patentovaná sonická technologie od Philips Sonicare napomáhá **unikátnímu dynamickému proudění tekutiny** do mezizubních prostor a podél linie dásní.

Dynamický čistící účinek vytváří **tekutou pěnu bohatou na kyslík** našleháním zubní pasty a slin. Rychle kmitající hlavice potom snadno směřuje tuto pěnu i do těžko dostupných míst v ústech.

Vláčna hlavice se pohybují rychlostí **31 000 kmitů** za minutu.

5 režimů čištění pro efektivnější čištění: Clean, White, Polish, Gum Care a Sensitive.

Dvouminutový časovač pomáhá zajistit dobu čištění zubů, doporučenou dentálními profesionály.

Philips Sonicare DiamondClean **pomáhá bělit zuby dvakrát lépe** než ruční kartáček.

Doba čištění: až **3 týdny**.



trnd

www.trnd.cz/philips-sonicare

trnd kontakt: lila@trnd.cz

© 2012 trnd Central Eastern Europe Kft. — 2040 Budaörs, Kálvária utca 7.