

Průvodce trnd-projektem

# Braun Silk Expert IPL BD 5001



trnd  
Projekt

Blog projektu: [ww.trnd.cz/braun-ipl](http://ww.trnd.cz/braun-ipl)  
trnd kontakt: [freud@trnd.cz](mailto:freud@trnd.cz)

# Vítejte v trnd-projektu s Braun Silk-expert IPL.

Chtěli byste si dopřát profesionální výsledky péče o vzhled z pohodlí vašeho domova? Nyní můžete. Budete mezi prvními, kteří se dozvědí o zbrusu novém Braun Silk-expert IPL – revoluční metodě na odstraňování chloupků.

Braun Silk-expert IPL využívá světelných impulsů, aby jemně, trvale a bezpečně odstraní chloupky.



Spolu s pečlivě vybranou skupinou 100 trnd-partnerů budete mít šanci vyzkoušet Braun Silk-expert IPL a sdílet své zkušenosti s ostatními ve vašem okolí – jak online, tak i offline.

**Už se nemůžeme dočkat, až začneme!**

## Náš trnd-projekt

V tomto trnd-projektu chceme:

1

... společně s dalšími 100 trnd-partnery z České republiky vyzkoušet Braun Silk-expert IPL.

Vyzkoušet



2

... stáhnout si do mobilu užitečnou aplikaci Braun Silk-expert, která vás upozorní, až bude čas na další ošetření.

Stáhnout



3

... stát se online-ambasadorem tím, že budeme mluvit o novém Braun Silk-expert IPL v recenzích na internetu.

Šířit poznatky



4

... zjistit vaše upřímné názory na Braun Silk-expert IPL ve dvou online dotaznících.

Sdílet názory



# Váš startovací balíček.

Na začátku projektu obdrží každý účastník startovací balíček s tímto obsahem:

- 1x Braun Silk-expert IPL, doporučená cena: 10 999 Kč
- 1x Průvodce projektem, který je plný užitečných rad a tipů



Všechny vaše otázky a nápady můžete prodiskutovat na našem projektovém blogu:  
[www.trnd.cz/braun-ipl](http://www.trnd.cz/braun-ipl)

Nejlepší způsob, jak nám můžete zaslat vaše otázky a návrhy, je na email:  
[freud@trnd.cz](mailto:freud@trnd.cz)

# Vaše úkoly v roli online reportérky.

1

Vyzkoušejte Braun Silk-expert IPL a foťte.

### Otevřete balíček:

Rozbalte svůj trnd balíček – třeba společně se svými přáteli, či příbuznými – a seznamte se s jeho obsahem: s Braun Silk-expert IPL. Pokud vás zajímá, jaké zajímavé funkce má, můžete si hned prostudovat manuál.

### Vaším dalším úkolem bude: Vyzkoušet!

Než začnete se zkoušením, musíte nejprve nabít baterii. A pak už vám nic nebrání začít. Podělte se s námi o momenty rozbalování a prvního zkoušení produktu s přáteli a rodinou prostřednictvím fotografií. Ty můžete snadno nahrát v oblasti pro členy „můj trnd“.

### Úkol splněn:

- Testování Braun Silk-expert IPL v každodenním životě.

2

Řekněte svůj upřímný názor.

Podpořte Braun tým svými nápady a názory, stejně jako návrhy na zlepšení, které může Braun použít v budoucím vývoji produktu. Můžete nám napsat svůj názor na Braun Silk-expert IPL v průběhu trvání projektu tak, že vyplníte dva online dotazníky. Tyto dotazníky naleznete na stránkách trnd, v oblasti „můj trnd“. Jakmile bude online dotazník připraven, obdržíte od nás informace e-mailem.

### Úkol splněn:

- Počáteční dotazník vyplněn.  
 Závěrečný dotazník vyplněn.

3

Píšte hodnocení online.

Napište alespoň jednu recenzi na každou ze 4 navrhovaných platforem pro hodnocení produktů. Sepište všechna kritéria vašeho testování, výhody a také nevýhody, které jste objevily. Protože se jedná o kvalitativní hodnocení, může být cenné těm, kteří uvažují o koupi Braun Silk-expert IPL.

**Sdílejte s námi odkazy vašich online recenzí:**

Abychom mohli vaše hodnocení na těchto online hodnotících platformách vidět, pošlete nám prosím internetový odkaz na svou recenzi prostřednictvím tlačítka „Napsat zprávu“ v oblasti „můj trnd“. Na stránkách blogu projektu také najdete návody, jak na psaní recenzí!

**Úkol splněn:**

- Recenze na [www.heureka.cz](http://www.heureka.cz) publikována a odkaz odeslán do trnd.
- Recenze na [www.alza.cz](http://www.alza.cz) publikována a odkaz odeslán do trnd.
- Recenze na [www.kasa.cz](http://www.kasa.cz) publikována a odkaz odeslán do trnd.
- Recenze na [www.electroworld.cz](http://www.electroworld.cz) publikována a odkaz odeslán do trnd.

## Braun Silk-expert IPL.

**Rychle, jednoduše a natrvalo: Braun Silk-expert IPL využívá záblesků k okamžitému odstranění chloupků na tváři a těle.**

Až donedávna byla IPL technologie dostupná jenom u profesionálů v salonech krásy. Vy nyní budete mít možnost vyzkoušet ji z pohodlí vašeho domova.

IPL je zkratkou pro intenzivní pulzní světlo (Intense Pulsed Light). U Silk-expertu od Braunu jsou světelné impulsy soustředěné do melaninu v chloupkách a tím deaktivují vlasové folikuly, a to zabraňuje novým chloupkům v růstu – snadné, že?

Pro vás to znamená hedvábně jemnou pokožku, která nevyžaduje nepřetržitou péči.



První výsledky lze obvykle pozorovat už po čtyřech použitích a 94 % žen uvádí, že pozorovaly viditelný úbytek chloupků po 3 měsících\*.

Již po jednom použití byste měla pocítit, jak dobře Braun Silk-expert IPL padne do ruky a jak snadno se používá. A vaše postřehy tedy můžete sdílet v recenzích.

\*klinická studie s 50 ženami. Velká Británie, 2013/2014

## Inteligentní senzory.

Braun Silk-expert IPL odstraňovač chloupků byl navržen tak, aby se automaticky přizpůsobil tónu pokožky. To z něho dělá jeden z nejbezpečnějších a nejvýkonnějších produktů na trhu.

Tóny pokožky se mohou velmi lišit. Možná si myslíte, že kůže v podpaží má stejný odstín jako kůže na lýtku, ale my vám můžeme garantovat, že tomu tak není! Silk-expert IPL průběžně měří tóny vaší pokožky a tím zajišťuje, že je na vaši kůži vysílána správná frekvence světla.


Ve skutečnosti je jeho inteligentní senzor tak pokročilý, že měří tón pokožky před každým jednotlivým světelným impulsem a podle toho upravuje intenzitu záření. To znamená, že odstraňování chloupků s Braun Silk-expert IPL není pouze snadné – je to také bezpečné a maximálně účinné.

A aby byl produkt ještě bezpečnější, senzor kontaktu s pokožkou zajišťuje, že Braun Silk-expert vysílá světelné impulsy pouze tehdy, pokud je v plně v kontaktu s pokožkou.



## Pohodlí zaručeno.

Inženýři v Braunu chytrě navrhli Braun Silk-expert IPL s ohledem na vaše pohodlí. Je vyvinutý tak, aby dobře padnul do ruky a jednoduše se používal – až do té míry, že ho můžete používat i při sledování televize!

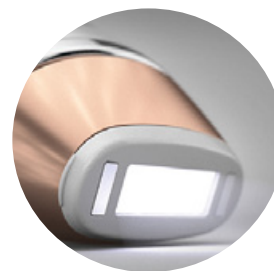

Zabudovaný senzor kontaktu s pokožkou zaručuje, že chloupky v malých oblastech, jako například nad horním rtem, jsou odstraněny bezchybně.



Pokud Braun Silk – expert IPL zkoušíte poprvé a jste trošku nejistá, proč nezkusíte citlivý režim? Jednoduše zapněte tuto funkci stisknutím tlačítka. Intenzita světla se tím sníží, což je skvělé i pro použití na citlivých oblastech.

# Jak to funguje?

Ted' už víte, že Silk-expert využívá pulzní světlo, že reaguje s melaninem ve vaší pokožce a že má bezpečnostní senzor, který upravuje světlo, aby bylo vhodné pro váš tón pokožky. Ale přesně jakým způsobem na chloupky působí?

Chloupky rostou ve třech fázích.

## Anagenní fáze


Růstová fáze: V této fázi se v koříncu formuje nový chloupěk a začíná růst.

## Katagenní fáze

Střední fáze: V této fázi chloupky vyrůstají z koříncu a jsou viditelné na povrchu kůže.

## Telogení fáze

Fáze vypadávání: Staré chloupky vyrostou a vypadnou a uvolní tak místo pro nové v růstové fázi.

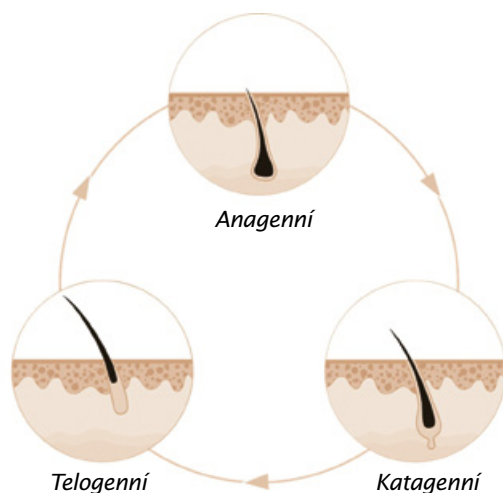

IPL tento cyklus přerušuje. Vlasové koříncy jsou deaktivovány a nové chloupky tak nerostou. To je také důvodem, proč může trvat několik týdnů, než uvidíte trvalé výsledky – IPL technologie funguje pouze na chloupcích, které jsou v růstové fázi.

# Je IPL vhodné pro mou pokožku?

IPL by se mělo používat pouze na hnědé nebo černé chloupky, pokud jsou zároveň doprovázeny světlými a středně tmavými tóny pokožky – jinak by světelné impulzy mohly ovlivnit také melanin v pokožce. To bohužel znamená, že IPL nelze použít na blondaté, zrzavé nebo šedé chloupky – tyto odstíny totiž nemají dostatek melaninu, aby mohlo IPL fungovat. Následující tabulka poskytuje praktický návod na určení, pro jaké chloupky a tóny pokožky je IPL vhodné:

	Tón pokožky					
Barva chloupků	Light	Light-Medium	Medium	Dark-Medium	Dark	Very Dark
Black	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Medium Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Light Brown	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Blond	✗	✗	✗	✗	✗	✗

## Jaké výsledky mohu očekávat?

Rozdílů si začnete všimnout už po čtyřech použitích a po dalších 6–12 použitích si začnete užívat trvale jemnou pokožku bez chloupků\*.

## Jak mám vědět, kdy IPL použít?

Používejte IPL na vaši pokožku jednou týdně a dosáhnete tak kompletního a trvalého odstranění chloupků. Stáhněte si užitečnou aplikaci Silk-expert a získáte tak pravidelná upozornění, kdy bude čas na opětovné použití.

\*pokud je užíváno dle doporučení

## Tipy a triky.



Ještě než začnete používat Braun IPL, dobře si přečtěte přiložený návod. Hned potom se podívejte na naše rady a tipy!

### Co dělat:

- V každém případě nejdříve chloupky oholte – to zajistí, že se Braun Silk-expert dostane přímo ke kořínkům.
- Pokud chcete, můžete také chloupky odstranit voskem, ale v tom případě musíte pár dní počkat, až chloupky zase trochu narostou, až poté je možná aplikace IPL.
- Produkt nejlépe funguje s čistou a suchou pokožkou.
- Braun Silk-expert IPL vysílá světelné impulzy strukturou chloupku až ke kořínce. Ze začátku to může být trochu zvláštní pocit, ale co nevidět si zvyknete.
- Používejte jednou týdně (v první fázi aplikace), abyste dosáhla nejlepších výsledků. Častější použití může vést k přecitlivělosti pokožky.
- Proč třeba spolu s aplikacemi IPL nezačít sledovat televizní seriál? Braun Silk-expert se používá tak jednoduše, že ho lze zkombinovat s odpočinkovými aktivitami!

### A co rozhodně nedělat:

- Nepoužívejte v blízkosti očí!
- Nedívejte se do světla. Ale produkt funguje jenom v případě, že je v kontaktu s pokožkou, takže to by neměl být problém.
- Pokud jste byla na slunci nebo v soláriu, musíte den nebo dva počkat, než můžete použít Braun Silk-expert IPL.
- Nepoužívejte na silně pihovitou pokožku, nebo na pokožku s tetováním a permanentním make-upem.
- A nedovolte, ať to vaši chlapi používají na vousy – na to není produkt určený!

## Skvělá pokožka od hlavy až k patě.

Všichni známe někoho se zdánlivě perfektní pokožkou. Chcete vědět, jak toho dosáhli? Podívejte se na níže uvedené tipy.

### Pijte vodu

Je nám jasné, že jste to už předtím nejspíš slyšeli, ale vaše pleť není to jediné, na co má správná hydratace příznivý dopad. Dostatek tekutin se pozitivně projeví i na vzhledu vašich nohou a rukou.

### Zvlhčujte

Vynechat hydrataci po sprše vám sice ušetří nějaký čas, ale dobře hydratovaná pokožka vypadá zářivě, zdravě a má přirozenou barvu.

### Zdravě jezte

Váš jídelníček neovlivňuje pouze šířku pasu, ale má vliv i na vaši pokožku. Jezte spoustu ovoce a zeleniny a maximalizujte jejich antioxidační efekt – borůvky, avokádo a špenát jsou výborné „potravin pro kůži“.

### Předstírejte to!

Pokud se chcete bezpečně opálit, vyzkoušejte samoopalovací krémy. Pokud koupíte hydratační tělový krém s přídavkem samoopalovacího, pak není třeba příliš se obávat o šmouhy nebo oranžové prsty!



# Vznik značky.

Značka Braun je zlidovělý pojem a je tomu tak už po mnoho desetiletí. Zajímalo vás někdy, jak to všechno začalo?

## Dvacátá léta minulého století:

V roce 1921 strojní inženýr Max Braun založil malou výrobní dílnu ve Frankfurtu.

Společnost prosperovala a v **pa-  
desátých letech** spatřil světlo světa první elektrický strojek – „S 50“.

**Sedmdesátá a osmdesátá** léta byla celá o vlasech: vyvíjely a zdokonaľovaly se produkty jako ruční fény, kulmy a žehličky na vlasy.

Partnerství mezi Braunem a Oral-B vedlo v **devadesátých letech** k vytvoření elektrického kartáčku.

Pro Braun se elektrické holicí strojky staly klíčovým produktem v **šedesátých letech**. Nabídka produktů se dále rozrůstala o produkty pro domácnost, jako jsou třeba kuchyňské roboty a odšťavňovače.

**Dnes** se Braun soustředí na tyto klíčové oblasti: péče o vzhled u mužů a žen, péče o vlasy a mnoho dalšího.

Hodnoty společnosti stále reflektují původní vizi bratrů Braunových: vytvářet produkty a jejich design s ohledem na lidi.

# Poznejte zástupkyni značky Braun!

Přivítejte Camille, zástupkyni značky Braun! Bude pozorně sledovat tento projekt a už teď se nemůže dočkat, až si přečte všechny vaše super recenze a dozví se, co si myslíte o Braun Silk-expertu. Nemějte proto strach, že by váš názor nebylo slyšet!





# P&G: Společnost

Značka Braun patří společnosti Procter & Gamble, která navíc vlastní celou „rodinu“ značek v České republice.

Ať už jde o kosmetiku nebo holení, domov nebo zdraví: kvalitní značkové produkty každodenně usnadňují život. Mnoho těchto produktů, kterým důvěřujeme, pochází od Procter & Gamble.

Procter & Gamble je mezi námi zhruba od roku 1837, když dva Evropané, William Procter a James Gamble, založili společnost v Ohio ve Spojených státech. Od té doby je více než 175 letá historie společnosti charakteristická pro svou inovativnost a kvalitní značkové produkty.

Zhruba 4.6miliardkrát za den přijdou lidé všude po světě do kontaktu se značkami Procter & Gamble. V devíti domácnostech z deseti je alespoň jeden produkt od P&G.

Cílem Procter & Gamble je udělat lidem kousek po kousku život příjemnější. Při vývoji a vylepšení produktů klade P&G vysoký důraz na udržitelnost: společnost rozvíjí své značky s ohledem na budoucí generace a podporuje rozvojové a sociální projekty.

*P&G výrobky jsou  
známé pro svou  
kvalitu*



# Zásady trnd

Abychom docílili upřímné, otevřené a úspěšné šeptandy, vytvořili jsme několik základních principů, jimiž se musí všichni členové projektového týmu řídit.

## **Bud'te otevřeni!**

Na trnd–projektu není nic tajného. Nesnažíme se o skrytou reklamu ani nechceme šířit žádné klamavé informace. Všichni účastníci by měli v době trvání projektu – až budou hovořit se svými přáteli a známými – dát všem na vědomí, že jsou členy trnd a podílejí se na jednom z našich projektů slovního doporučení.

## **Bud'te upřímní!**

Zdá se to být samozřejmé, ale bohužel to nemusí vždy být běžná praxe. Jedině upřímné slovní doporučení funguje. Nesnažte se lidmi manipulovat, ani nepopisujte věci lepší, než ve skutečnosti jsou. Jednoduše řekněte svůj upřímný názor a rovněž názor vašich přátel a známých.

## **Mějte uši nastražené!**

Cílem slovního doporučení není ovlivňování vašich přátel či známých. Není třeba cokoli vnučovat – stačí jim o produktu z trnd–projektu říct a umožnit jim udělat si vlastní názor. Byli bychom rádi, kdybyste shromáždili takových názorů co nejvíce.



# Pište hodnocení online.

Napište alespoň jednu recenzi na každou ze 4 platforem. Zapište do ní všechna kritéria hodnocení, výhody a nevýhody, na které jste narazili. A pamatujte – lidé, kteří na internetu hledají informace o výrobku, mají zájem o srozumitelné, stručné a pravdivé informace.



**Sdílejte s námi URL linky vašich recenzí:**  
Samozřejmě, že chceme vidět vaše recenze.

Ukázat nám je můžete následovně:  
Zkopírujte URL odkaz stránky, kde je vaše recenze uložena a klikněte na „napsat zprávu“ v „můj trnd“, vyberte variantu „online“ a vložte zde svůj link.

## Úkol splněn:

- Recenze na [www.heureka.cz](http://www.heureka.cz) publikována a odkaz odeslán do trnd.
- Recenze na [www.alza.cz](http://www.alza.cz) publikována a odkaz odeslán do trnd.
- Recenze na [www.kasa.cz](http://www.kasa.cz) publikována a odkaz odeslán do trnd.
- Recenze na [www.electroworld.cz](http://www.electroworld.cz) publikována a odkaz odeslán do trnd.



# Náš názor se počítá!

Náš názor na Braun Silk-expert IPL na různých spotřebitelských platformách může pomoci těm, kteří hledají informace o přístroji na internetu.

## Celkové hodnocení

- Kolik hvězdiček si Braun Silk-expert IPL zaslouží?
- Odpovídá cena kvalitě?
- Doporučíte tento přístroj svým přátelům?

## Individuální hodnocení

- Je Braun Silk-expert IPL trvalé řešení růstu chloupků?
- Přesvědčila vás kvalita Braun Silk-expert IPL? Jak pohodlně se používá?
- Můžete svůj názor podpořit fotografií nebo videem?

## Další informace

- Až budete psát recenzi online, můžete si zvolit přezdívku (může být stejná, jakou máte v trnd), nebo vaše skutečné jméno.
- Některé stránky vyžadují přihlášení, aby bylo možné vložit recenzi. Pokud účet nemáte, je možné se velice jednoduše zaregistrovat.
- Poznámka: Jednotlivé stránky po vás mohou požadovat vaši e-mailovou adresu. Důvodem je většinou pouze oznámení o stavu vaší recenze, která se obvykle na internetu objeví několik dní po vložení.



# trnd

[www.trnd.cz/braun-ipl](http://www.trnd.cz/braun-ipl)

trnd kontakt: [freud@trnd.cz](mailto:freud@trnd.cz)

© 2016 trnd Central Eastern Europe Kft. Lublaňská 667/42, 120 00 Praha